


RD 细胞说明书

货号: **NCL-10117**

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

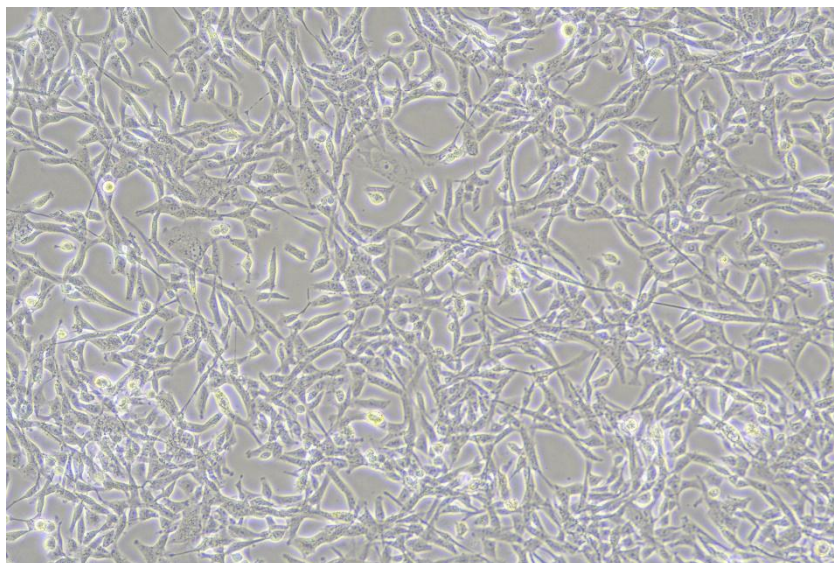

细胞名称	人恶性胚胎横纹肌瘤细胞
细胞别称	RD; R D; RD-2; RD 2; 130T; 130-T; 130 T; TE-32; TE 32; TE32; TE 32.T; Te 32.T
种属来源	人
组织来源	肌肉组织
细胞形态及生长特性	上皮细胞样（梭型和多核细胞）、贴壁生长（少量悬浮）
培养方案	培养体系： DMEM + 10% FBS (C8500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件： 37℃ 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 2 - 1: 4, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案： 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案： 使用新赛美无血清细胞冻存液（货号: C40050） -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	—————

