


MCF-7 细胞说明书

货号: **NCL-10159**

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

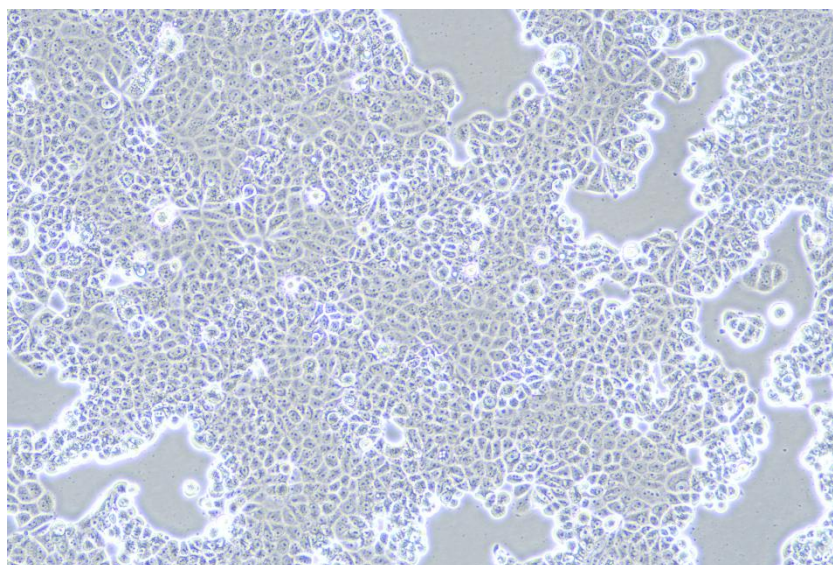

细胞名称	人乳腺癌细胞
细胞别称	MCF-7;MCF 7; MCF.7; MCF7; Michigan Cancer Foundation-7; ssMCF-7; ssMCF7;MCF7/WT; MCF7-CTRL; IBMF-7
种属来源	人
组织来源	乳腺, 乳房; 源自转移部位: 胸腔积液; 女性; 69 岁
细胞形态及生长特性	上皮细胞样、贴壁生长
培养方案	培养体系: MEM+10μg/mL Insulin+ 10% FBS(C8500)+ 1% P/S(C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37℃ 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 3 - 1: 4, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	—————

