


MDA-MB-231 细胞说明书

货号: NCL-10168

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

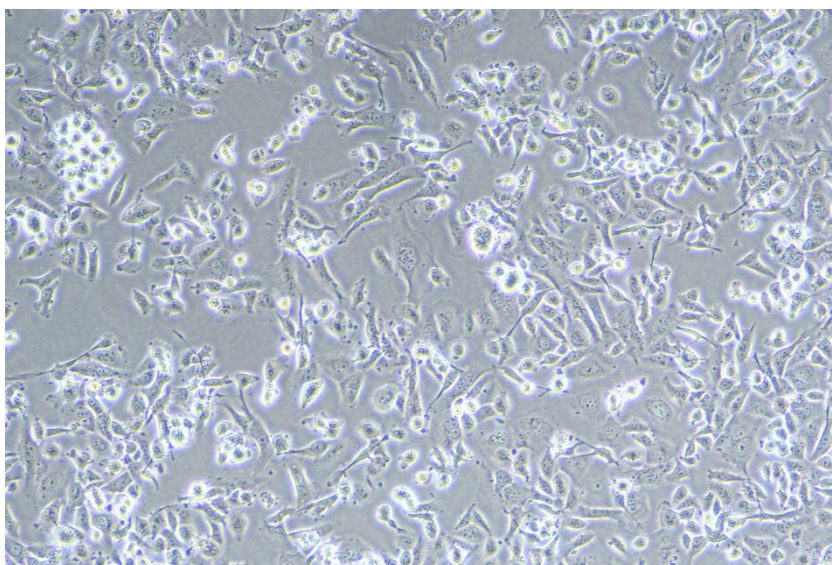

细胞名称	人乳腺癌细胞
细胞别称	MDA-MB-231, MDA-MB 231, MDA.MB.231, MDA MB 231, MDA MB231, MDA Mb231, MDA-MB231, MDAMB-231, MDAMB231, MDA-231, MDA231, MB231, MD Anderson-Metastatic Breast-231
种属来源	人
组织来源	乳腺腺癌, 转移性胸膜渗出液; 胸水
细胞形态及生长特性	上皮细胞样、贴壁生长
培养方案 A	培养体系: DMEM + 10% FBS (C8500) + 1% P/S (C100C5) 培养条件: 37°C 5% CO ₂
培养方案 B	培养体系: Leibovitz's L-15 + 10% FBS (C8500) + 1% P/S (C100C5) 培养条件: 37°C 100% 空气
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 2 - 1: 4, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基 + 30%FBS + 10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	1 级

电话: 0512-66378926

邮箱: xinsaimei@ncmbio.com

网址: www.ncmbio.com

