


RPMI-2650 细胞说明书

货号: **NCL-10120**

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

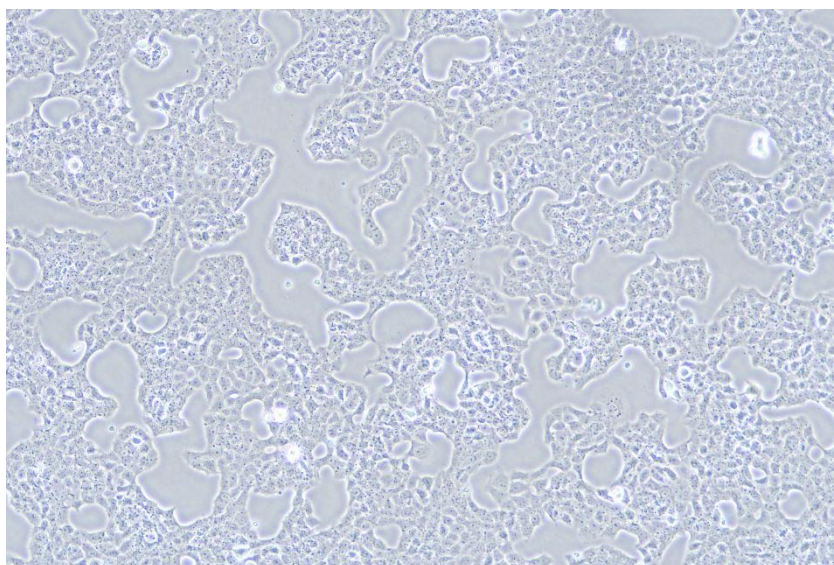

细胞名称	人鼻腔上皮细胞
细胞别称	RPMI-2650; RPMI 2650; RPMI2650; R.P.M.I. #2650; Roswell Park Memorial Institute 2650
种属来源	人
组织来源	鼻中隔
细胞形态及生长特性	上皮细胞样 (多角形, 边缘不规则)、贴壁生长
培养方案	培养体系: MEM (含 NEAA) + 10% FBS (C8500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37℃ 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 2 - 1: 4, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	

电话: 0512-66378926

邮箱: xinsaimei@ncmbio.com

网址: www.ncmbio.com

