


C8-D1A 细胞说明书

货号: **NCL-10192** 规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)



细胞名称	小鼠小脑星形胶质细胞
细胞别称	C8-D1A;C8D1A;Astrocyte type I clone
种属来源	小鼠
组织来源	出生 8 天小鼠小脑组织
细胞形态及生长特性	神经细胞样 (星形, 多突起, 部分细胞呈上皮样)、贴壁生长
培养方案	培养体系: DMEM + 10% FBS (C8500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37℃ 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 3 - 1: 4, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	

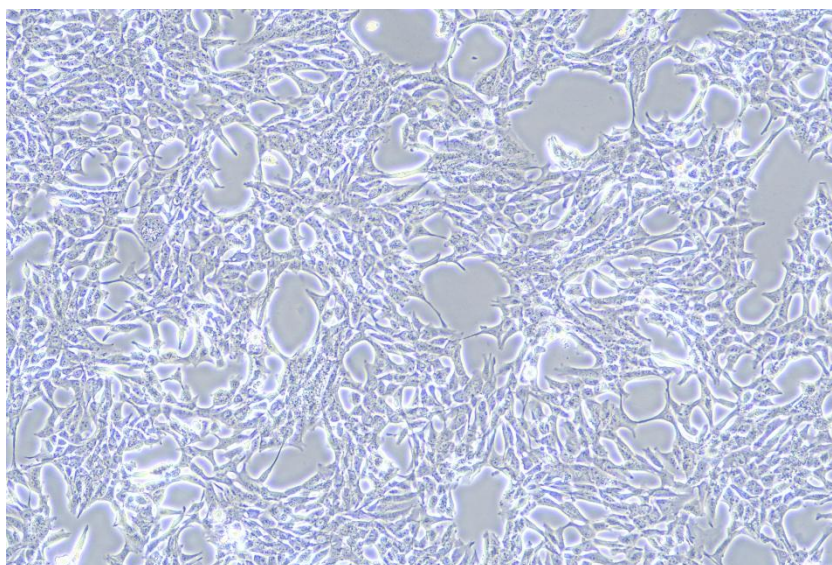