


NCTC clone 929[L cell, L-929]细胞说明书

货号：NCL-10219 规格： $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶（冻存管）



细胞名称	小鼠成纤维细胞
细胞别称	NCTC 929;NCTC-929;NCTC929;NCTC-929L;L cell; L cells;L-cell;L-cells;L cell line;L;Strain L-929;L-929; L 929;L929;L929(NCTC);Clone 929;Earles's cells;Earle's L cells
种属来源	小鼠
组织来源	皮下结缔组织（疏松结缔组织及脂肪组织）
细胞形态及生长特性	成纤维细胞样、贴壁生长
培养方案	培养体系： MEM（含 NEAA）+ 10% HS + 1% P/S（C100C5） 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件：37℃ 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液（C100C1）
传代比例	1: 3 - 1: 4，换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案： 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案： 使用新赛美无血清细胞冻存液（货号：C40050） -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用

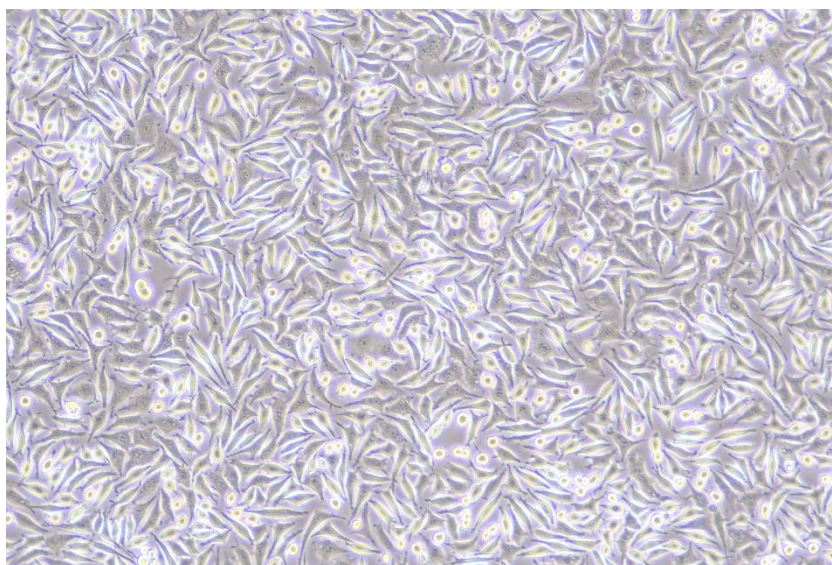

注意事项	该细胞存在血清争议，功能性实验（如毒性测试）优先采用马血清，避免形态变异干扰结果。
------	---

