


C1498 细胞说明书

货号: NCL-20014 规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)



细胞名称	小鼠白血病细胞
细胞别称	C-1498
种属来源	C57BL/6J 小鼠
组织来源	外周血
细胞形态及生长特性	淋巴母细胞样、悬浮生长
培养方案	培养体系: DMEM + 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37°C 5% CO ₂
传代比例	1×10^5 - 3×10^5 cells/mL, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用

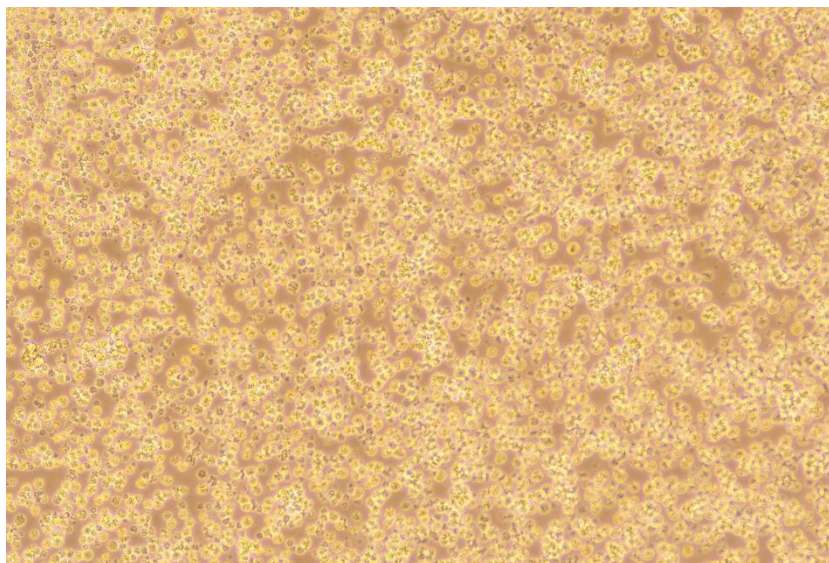

注意事项	1.细胞密度维持在 1×10^6 cells/mL 活力最佳，不超过 2×10^6 cells/mL。 2.细胞密度低时增殖慢，有很多黑点。 3.细胞形态并不是标准的圆形，可能会出现贴壁情况，但一般轻拍培养容器侧壁会脱落。
------	---

