


SU-DHL-4 细胞说明书

货号: NCL-20005 规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)



细胞名称	人 B 淋巴瘤细胞
细胞别称	SUDHL4;Sudhl4;SUDHL-4;Sudhl-4;SuDHL 4; SUD-4;SUD4;SU4;Stanford University-Diffuse Histiocytic Lymphoma-4;DHL-4;DHL4
种属来源	人
组织来源	腹腔积液
细胞形态及 生长特性	淋巴母细胞样、悬浮生长
培养方案	培养体系: RPMI-1640 + 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37℃ 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	5×10^5 - 1×10^6 cells/mL, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅用于科学研究
注意事项	该细胞为悬浮细胞, 请注意离心收集细胞悬液。

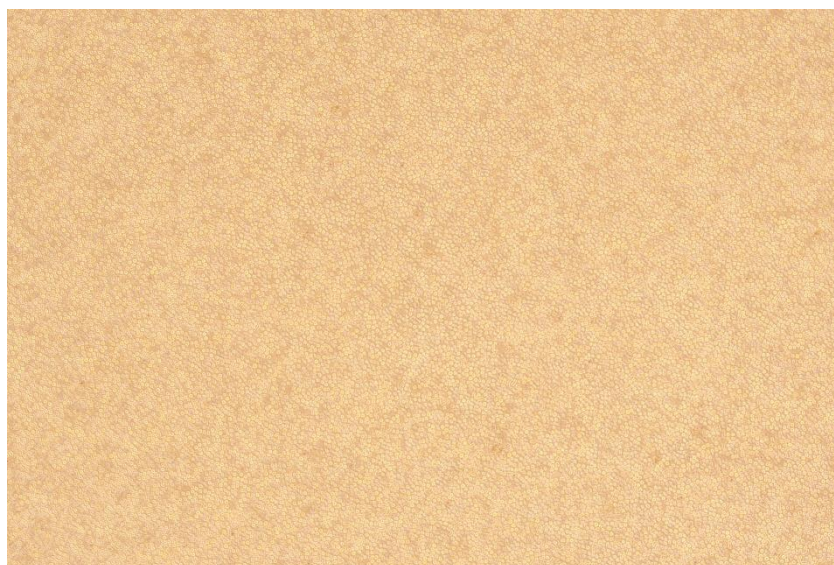