


## U-2932 细胞说明书

货号: NCL-20009      规格:  $>5 \times 10^5$  cells/T25 培养瓶 (冻存管)



|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 细胞名称      | 人弥漫大 B 淋巴瘤细胞                                                                                              |
| 细胞别称      | U2932; ACC633                                                                                             |
| 种属来源      | 人                                                                                                         |
| 组织来源      | 腹水                                                                                                        |
| 细胞形态及生长特性 | 淋巴母细胞样、悬浮生长                                                                                               |
| 培养方案      | 培养体系:<br>RPMI-1640+ 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5)<br>推荐使用新赛美配套专用完全培养基<br>培养条件: 37℃ 5% CO <sub>2</sub> |
| 传代比例      | 细胞密度达 80%-90%, 1:2 - 1:3; 换液 2-3 次/周                                                                      |
| 冻存条件      | 常规方案:<br>60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存<br>推荐方案:<br>使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050)<br>-80℃或液氮保存                 |
| 生物安全等级    | 2 级                                                                                                       |
| 用途        | 仅用于科学研究                                                                                                   |
| 注意事项      | 该细胞为悬浮细胞, 请注意离心收集细胞悬液;<br>请勿直接倒掉细胞培养液。                                                                    |

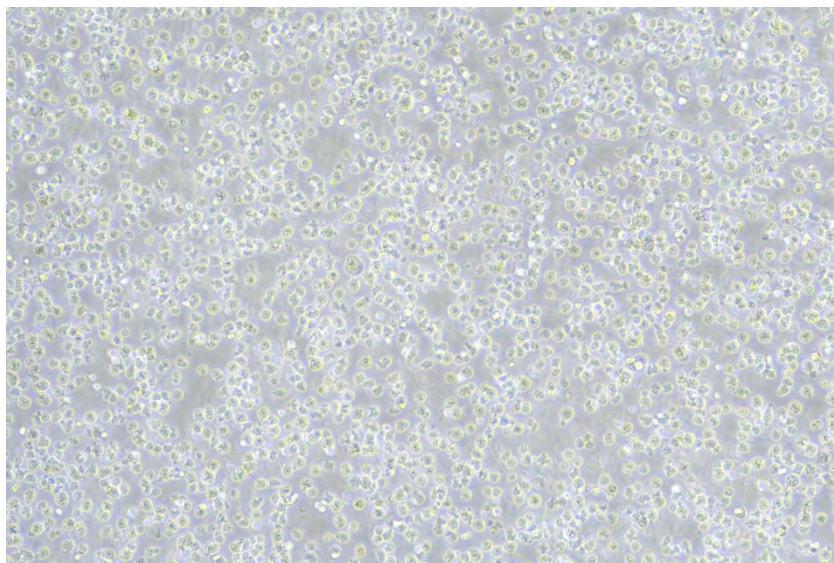