


Y3-Ag 1.2.3 细胞说明书

货号: NCL-20024 规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)



细胞名称	大鼠骨髓瘤细胞
细胞别称	Y3.AG.1.2.3;Y3-Ag1.2.3;Y3-Ag1, 2, 3;Y3Ag1.2.3;210RCY3-Ag1.2.3;Y3-Ag123;Y3;Y3M
种属来源	大鼠
组织来源	大鼠浆细胞瘤; 骨髓瘤; 品系 Lou
细胞形态及生长特性	淋巴母细胞样、悬浮生长
培养方案	培养体系: DMEM + 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37°C 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	3×10^5 - 5×10^5 cells/mL, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	1. 该细胞为悬浮细胞, 请注意离心收集细胞悬液。 请勿直接倒掉细胞培养液。 2. 细胞会有部分贴壁存在, 可直接吹打下来。

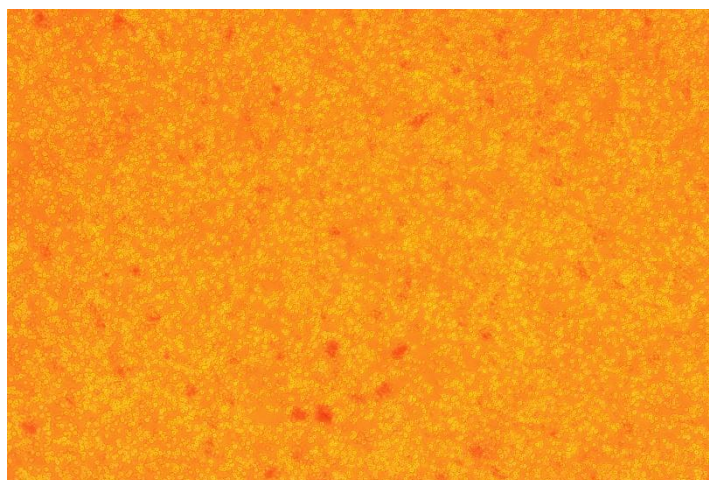