


NCI-H69 细胞说明书

货号: **NCL-20012** 规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)



细胞名称	人小细胞肺癌细胞
细胞别称	NCI-H-69;NCI H69;H69;H-69;NCIH69;NCI-HUT-69;H69/P; NCI-H69C;H69C;H69c
种属来源	人
组织来源	胸腔积液
细胞形态及生长特性	淋巴母细胞样、悬浮聚团生长
培养方案	培养体系: RPMI-1640+ 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37℃ 5% CO ₂
传代比例	5×10^5 - 1×10^6 cells/mL; 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅用于科学研究
注意事项	该细胞为悬浮细胞, 请注意离心收集细胞悬液; 请勿直接倒掉细胞培养液。

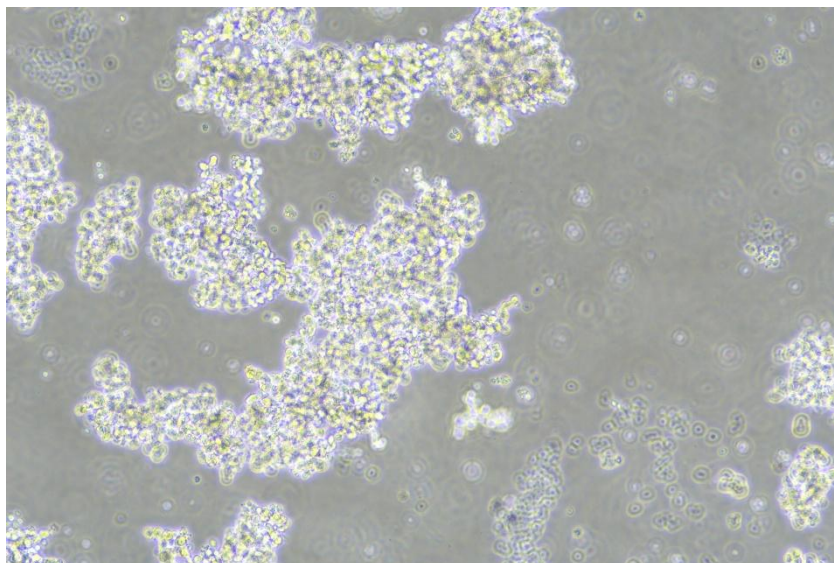