


Hela 细胞说明书

货号：NCL10250

规格：>5×10⁵ cells/T25 培养瓶（冻存管）

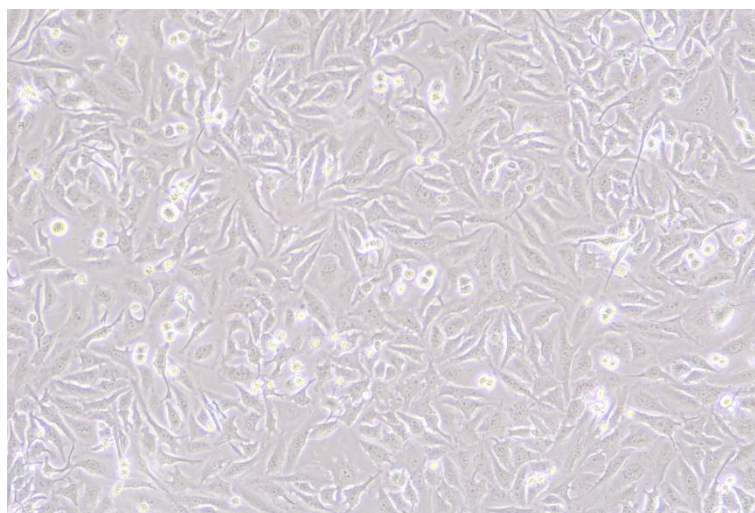

细胞名称	Hela（人宫颈癌细胞）
细胞别称	HELA;Hela;He La;He-La;Henrietta Lacks cells;Helacyton gartleri
种属来源	人
组织来源	宫颈腺癌
细胞形态及生长特性	上皮细胞样、贴壁生长
培养方案	培养体系： MEM（含 NEAA） + 10% FBS（C9500） + 1% P/S（C100C5） 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件： 37℃ 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液（C100C1）
传代比例	1： 2 - 1： 4， 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案： 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案： 使用新赛美无血清细胞冻存液（货号：C40050） -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	

