


mutudc1940 细胞说明书

货号: NCL10252

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

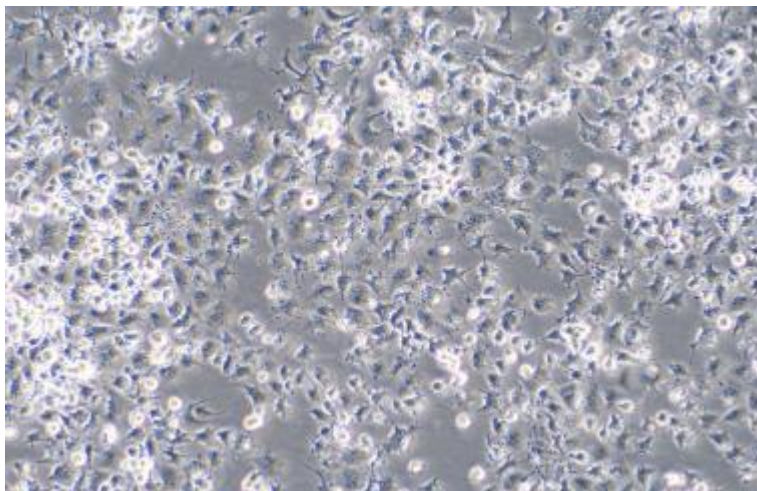

细胞名称	mutudc1940 永生化小鼠树突状细胞
细胞别称	Immortalized Mouse Dendritic Cells (MutuDC1940)
种属来源	小鼠
组织来源	脾脏组织
细胞形态及生长特性	上皮细胞样、悬浮贴壁混合生长
培养方案	培养体系: RPMI-1640(C500C5) + 20% FBS (C9500) + 0.05mMβ-巯基乙醇+ 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基, 货号 CM-10252 培养条件: 37℃ 5% CO2
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1) 贴壁部分消化 2-3 分钟 悬浮部分离心收集(1000RPM,5 分钟)
传代比例	1:2 传代, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80℃或液氮保存
生物安全等级	2 级
用途	仅供科研使用
注意事项	该细胞培养是需要涂有 0.1%明胶(ATCC)的容器上培养, 每 10cm ² 表面积使用 1.0mL 明胶, 在 37.0° C 下孵育≥45 分钟



电话: 0512-66378926

邮箱: xinsaimei@ncmbio.com

网址: www.ncmbio.com