


CTLL-2 细胞说明书

货号: NCL20042

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

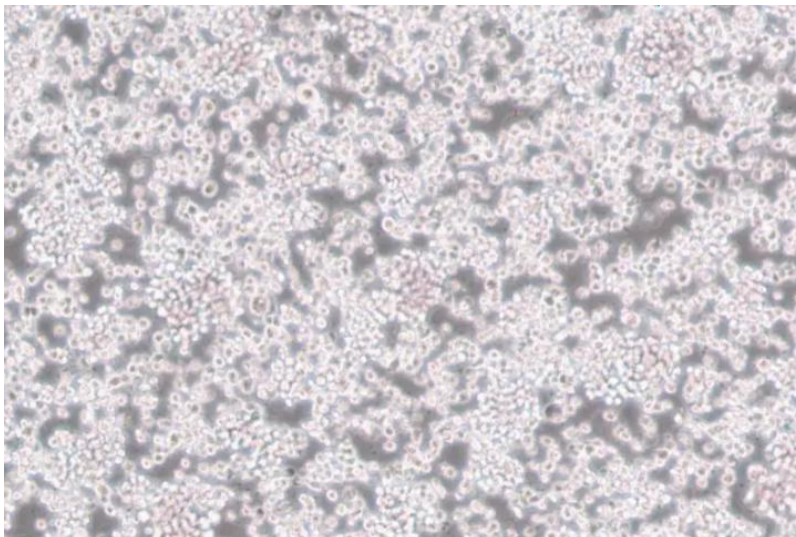

细胞名称	CTLL-2 (小鼠 T 细胞)
细胞别称	CTLL2;CTLL(2)
种属来源	小鼠
组织来源	淋巴瘤: C57BL/6N
细胞形态及生长特性	淋巴母细胞样、悬浮生长
培养方案	培养体系: RPMI-1640(C500C5) + 10% FBS (C9500) +100 IU/mL recombinant IL-2 +1.0 μ g/mL Con A + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基, 货号 CM-20042 培养条件: 37 $^{\circ}$ C 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 2 - 1: 3, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80 $^{\circ}$ C或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	

电话: 0512-66378926

邮箱: xinsaimei@ncmbio.com

网址: www.ncmbio.com

