


HEK-293 细胞说明书

货号: NCL-10251 规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)



细胞名称	人胚肾细胞
细胞别称	Hek293; HEK-293; HEK/293; HEK 293; HEK;293; 293; 293 HEK; 293 Ad5; Human Embryonic Kidney 293
种属来源	人
组织来源	胚肾
细胞形态及生长特性	上皮细胞样、贴壁生长
培养方案	培养体系: DMEM-高糖 + 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37°C 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 4- 1: 8, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	2 级
用途	仅供科研使用
注意事项	该细胞贴壁松散, 操作时请尽量轻柔; 换液时需预热培养基; 收货如有大块脱落的细胞团, 为正常现象, 请按照收货注意事项处理; 建议用无血清非程序冻存液冻存。

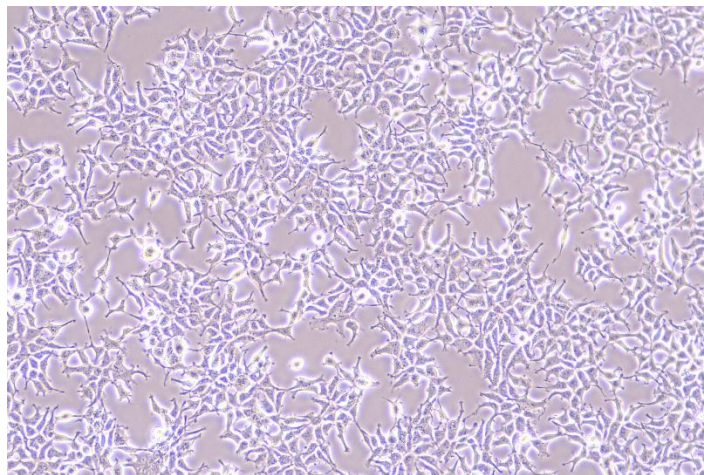