


DC2.4 细胞说明书

货号: **NCL-10255** 规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)



细胞名称	小鼠树突状细胞
细胞别称	DC 2.4
种属来源	小鼠
组织来源	骨髓
细胞形态及生长特性	圆形；梭形，胞突呈分枝状、贴壁少量悬浮生长
培养方案	培养体系： RPMI-1640 + 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件： 37℃ 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 3 - 1: 6, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案： 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案： 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	圆形贴壁，少量贴壁细胞伸展开，少量悬浮。密度低时漂浮较少，密度高时，漂浮比例增大，漂浮部分也可以培养。

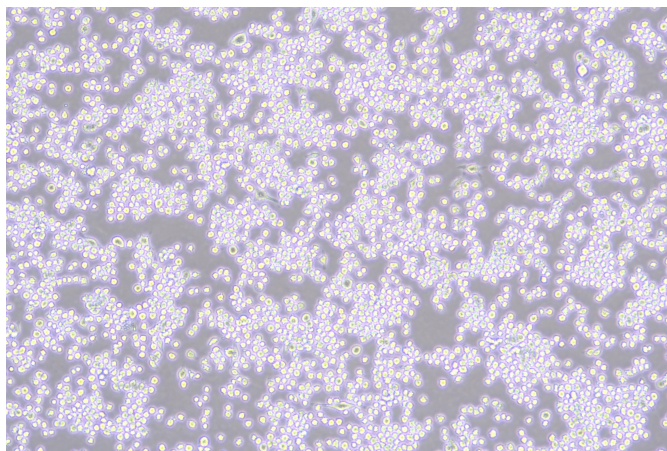