


Neuro-2a 细胞说明书

货号: NCL-10256 规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)



细胞名称	小鼠脑神经瘤细胞
细胞别称	NEURO-2A; Neuro 2a; Neuro2a; Neuro2A; N-2a; N2a; N2A; Nb2a; NB2a
种属来源	小鼠
组织来源	脑
细胞形态及生长特性	神经细胞样、阿米巴样、贴壁生长
培养方案	培养体系: MEM (含 NEAA) + 10% FBS (C9500) + 1% Glutamax + 1% Sodium Pyruvate + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37°C 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 3 - 1: 4, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	—————

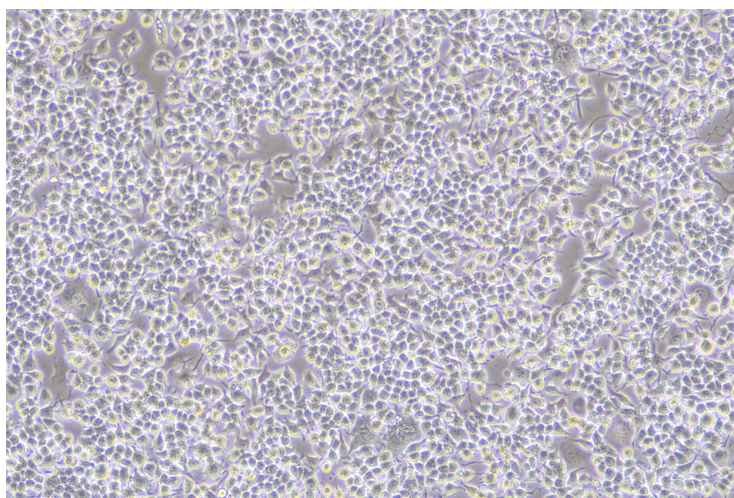