


Alpha TC1 clone6 细胞说明书

货号: NCL10253

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

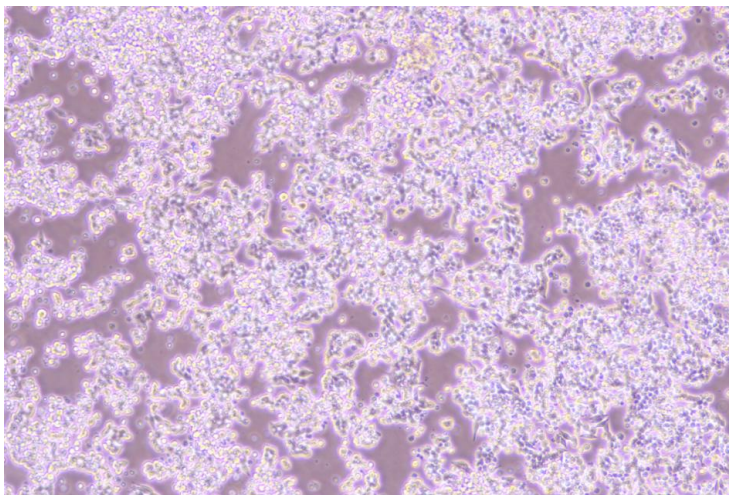

细胞名称	小鼠胰岛素瘤胰岛 α 细胞(Alpha TC1 clone6)
细胞别称	alphaTC clone 6;alpha-TC1.6;alphaTC1.6;alpha-TC1-6;alpha TC1-6;alpha TC1.6;aTC1 Clone 6;aTC1-6
种属来源	小鼠
组织来源	胰腺 (胰岛 α 细胞)
细胞形态及生长特性	上皮细胞样、贴壁生长 (常形成松散连接的细胞簇, 也有少量悬浮单细胞)
培养方案	培养体系: DMEM-L (C500C3) + 10% FBS (C9500) + 0.1mM NEAA +1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基, 货号 CM 培养条件: 37°C 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 2 - 1: 3, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	

电话: 0512-66378926

邮箱: xinsaimei@ncmbio.com

网址: www.ncmbio.com

