


A427 细胞说明书

货号: NCL10263

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

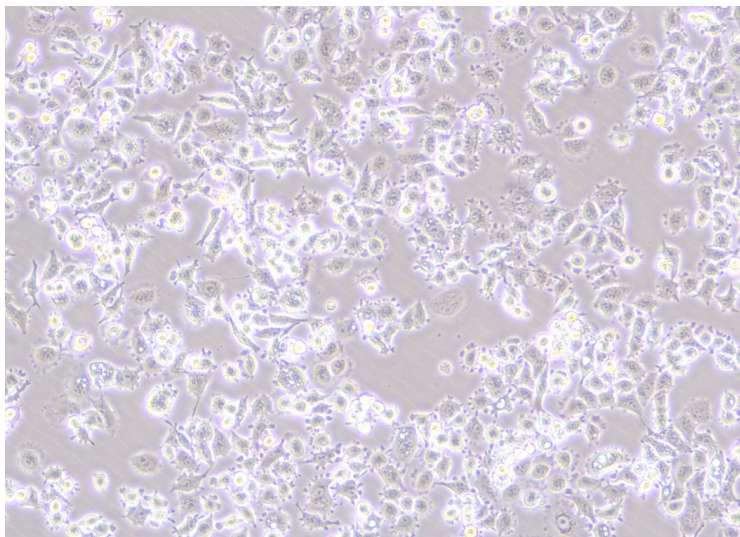

细胞名称	A427 细胞 (人肺癌细胞)
细胞别称	A-427
种属来源	人
组织来源	肺
细胞形态及生长特性	上皮细胞样、贴壁生长
培养方案	培养体系: MEM (含 NEAA) + 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37°C 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 2 - 1: 4, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	1. 培养过程中漂浮量较多, 且伴生黑点, 可换液清洗去除 2. 该细胞复苏后恢复能力偏弱, 贴壁速度慢, 复苏后 48 小时内尽量避免频繁移动培养瓶

电话: 0512-66378926

邮箱: xinsaimei@ncmbio.com

网址: www.ncmbio.com

